



- Preciso
- Fácil de usar
- Integrable
- Portátil
- Elegante
- Calidad
- Modernidad
- Profesionalidad
- Interactividad
- Imagen

**M'eye Fit**  
TOUCH

## ¿Qué es M'eye Fit Touch?

**M'eye Fit Touch** es un ordenador con una cámara de alta definición que permite realizar la toma de medidas de forma **muy fácil y precisa** en el punto de venta.

Con **M'eye Fit Touch** el proceso es automático, eficaz, rápido, sencillo y adaptado a las nuevas tecnologías, ofreciendo además una **imagen de modernidad para tu centro óptico**.

En definitiva, **M'eye Fit Touch** es el equipamiento que la óptica moderna requiere.

## ¿Qué hace M'eye Fit Touch ?

- **Toma medidas de forma precisa:** distancia interpupilar, distancias nasopupilares, alturas de montaje, distancia al vértice, ángulo pantoscópico, ángulo de galbe y distancia de lectura. No necesita conexión a Internet para obtener las medidas.
- **Compara monturas:** mediante la captura de fotografías, podrás mostrar al cliente una comparativa entre las monturas que se haya probado, para que pueda decidir cuál le gusta más.
- **Ayuda en el proceso de venta:** contiene una aplicación con contenidos demostrativos para reforzar la argumentación en la venta.

## ¿Cómo tomar las medidas con M'eye Fit Touch?

**M'eye Fit Touch detecta todos los parámetros de medida** en muy pocos pasos:

1. Coloca el arnés en la montura elegida.
2. Toma medidas en menos de un minuto con tan solo dos disparos.
3. Obtén los resultados y la acotación al momento.
4. Compártelos rápidamente con tu cliente.

Todos los datos tomados con **M'eye Fit Touch** pueden ser transferidos al software de gestión de la óptica.



# ¿Qué te aporta M'eye Fit Touch?



1. **Agiliza y facilita** el proceso de toma de medidas.
2. Permite **mayor interactividad** con tu cliente.
3. Ofrece una **experiencia de compra** nueva y diferenciadora.
4. Da a tu centro óptico una **imagen de modernidad**.

## Especificaciones técnicas

### ~ Accesorios

- Arnés.
- Soporte antideslizante.
- Soporte.
- Tarjeta Mirco SD + adaptador.
- Cargador.
- Lápiz digital.
- Gamuza de limpieza.

### ~ Dimensiones

- 292 mm x 210 mm x 184mm

### ~ Peso

- 1.010 g

### ~ Fuente de alimentación

- 110 – 240 v 50-60 Hz

### ~ Pantalla


- 11 ,6 pulgadas – pantalla táctil

### ~ Procesador

- CoreTM 5 – 1.6 GHz

### ~ Capacidad de almacenamiento

- 64 Gbits

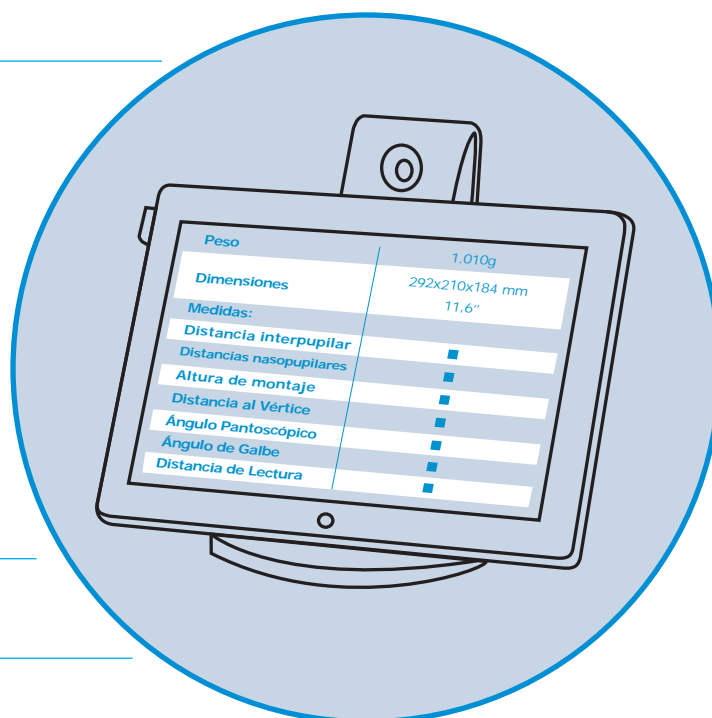

## Essilor, una solución integral para la óptica

Una vez más Essilor ofrece **soluciones que ayudan al profesional del cuidado de la visión** a mejorar su experiencia en el proceso de venta. Desde nuestra completa gama de lentes hasta las herramientas para el punto de venta pasando por diferentes servicios diseñados a medida.



ver mejor el mundo

Essilor Internacional es líder mundial en diseño, fabricación y personalización de lentes oftálmicas. Presente en los 5 continentes, Essilor ofrece una amplia gama de lentes bajo la insignia Varilux®, Crizal® UV, Xperio®, OptiFog™ UV y marcas Essilor® para corregir la miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo.